

福祉用具

レンタルカタログ

安心と信頼の
S
消毒工程管理
認定マーク

一般社団法人
シルバーサービス
振興会の福祉用具
の消毒工程管理
認定基準に適合

特殊寝台

特殊寝台
付属品

床ずれ
防止用具

体位変換器

車いす

車いす
付属品

スロープ

認知症老人
徘徊感知機器

移動用
リフト

歩行器

歩行補助杖

手すり

（販売）
腰掛便座

（販売）
入浴用品

vol. **13**
2015.6



自立した快適な在宅生活のために

高齢者が自分の身体を使って生活するだけでなく、
自分の意思で暮らしなれた日常生活を続けられること。

これが、私たちの考える高齢者の自立です。従来の「介護しやすい用品」から「自立支援のための用品」の普及をめざしてまいりました。今後も充実した設備と技術力で、高齢者の方々の快適な在宅環境づくりと、介護スタッフからの信頼と連携に努めてまいります。



◀ドイツ仕様の高剛性と豊富な
サイズのモジュール標準型車いす
オットーボック M シリーズ
座幅 33 ~ 58cmまで全サイズ対応



電動立上り補助機能付自走用車いす
スタンドアップチェア ジョイ



通気性抜群のメッシュボトムベッドと
床ずれ防止マットレス(ロンボケア・プリバント)




可搬型階段昇降機
トランサポータ



納品前の点検・調整




メンテナンス(補修・点検)

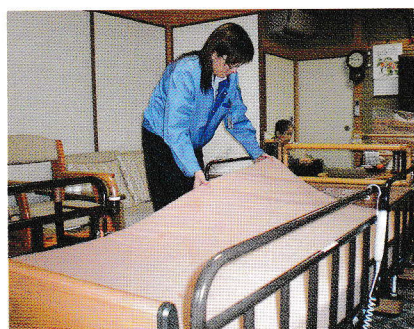

マットレスの定期交換

万全の衛生管理と商品管理

安心してご利用いただくため「福祉用具の消毒工程管理認定基準」適合の消毒工程により全品を消毒し、併せて機械部分の厳重な整備点検により品質を維持するよう心掛けています。また、バーコード管理によりお使いいただく福祉用具の使用・消毒の履歴も追跡できる体制をとっています。

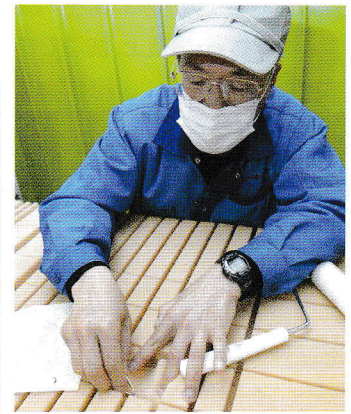

フィッティング(適合・調整)とモニタリング

高機能な福祉用具も、ご利用者に合わせる技術が伴わなければ機能は半減してしまいます。当社スタッフは、障害度の高いご利用者にも対応できるよう社内外の研修で、最新の知識と技術を学んでいます。

また、ご利用者を定期的にご訪問させていただき、用具の状況や、ご利用状態を調査するモニタリングにも力を入れています。



マットレスの定期交換

長期の在宅療養では、マットレスの汚れやにおいが気になるものです。また、マットレスのヘタリや通気性の劣化は新たな疾患を誘発することもあります。

当社ではレンタル中、定期的にマットレスの取り替えをおこない、性能が100%活かせる機器のメンテナンスに留意しています。




マットレスは全品洗浄・蒸気消毒(高温湿熱乾そう)

専従スタッフが回収したマットレスは、全品ガス消毒をした後、カバーと本体を別々に洗浄することにより、におい、汚れ、塵、ダニの糞等を洗い流し、独自の蒸気消毒(高温湿熱乾そう)により、ダニ、菌類等を死滅させ、高度な衛生・滅菌状態のマットレスを提供いたします。


※材質・構造上、洗浄できない場合があります。

予備消毒

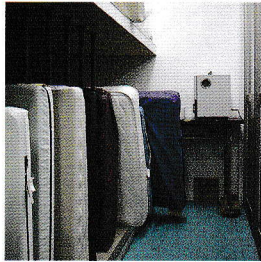

安定化二酸化塩素ガスにより、予備消毒を行います。

温水洗浄

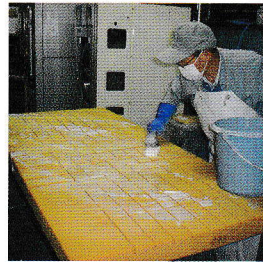

手作業による温水洗浄を行います。(カバーと本体を別々に洗います。)

すすぎ・脱水




水平回転式のマットレス専用脱水機によりすすぎ、水分を85~90%脱水します。

消毒・乾そう



マットレス専用湿熱消毒(乾そう)機で、マイコン・センサー制御による蒸気消毒(高温湿熱乾そう)を行います。

検品

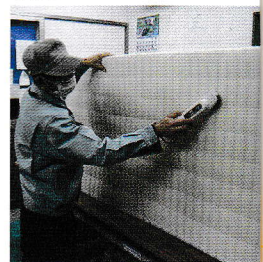

1品ごとに水分計、検針器による検品を行います。(マットレス本体を別に手作業で検品します。)

除菌性能評価試験(近鉄スマイルサプライ東大阪工場) (平成17年12月6日 財団法人北里環境科学センターによる)

所定の工程乾そう後に黄色ブドウ球菌ならびに大腸菌とも試験布あたり 10^7 個の付着菌数が、乾そう後はすべて定量下限値未満となり、消毒・乾そう工程での除菌効果を確認しています。

表1 ファイバー製マットレスの除菌性能評価試験結果

試験菌	No.	各洗濯工程での菌数(個/5×5cm試験布)		
		初発	洗濯脱水後	消毒・乾そう後
Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)	1	7.8×10^7	5.1×10^7	測定限界以下
	2	7.6×10^7	3.2×10^7	測定限界以下
	3	8.5×10^7	2.6×10^7	測定限界以下
	4	9.3×10^7	2.8×10^7	測定限界以下
	5	1.2×10^8	2.3×10^7	測定限界以下
	平均	9.0×10^7	3.2×10^7	測定限界以下
Escherichia coli (大腸菌)	1	1.5×10^8	4.1×10^7	測定限界以下
	2	1.5×10^8	4.0×10^7	測定限界以下
	3	1.4×10^8	1.6×10^7	測定限界以下
	4	1.6×10^8	2.4×10^7	測定限界以下
	5	1.4×10^8	4.0×10^7	測定限界以下
	平均	1.5×10^8	3.2×10^7	測定限界以下

表2 ウレタン製マットレスの除菌性能評価試験結果

試験菌	No.	各洗濯工程での菌数(個/5×5cm試験布)		
		初発	洗濯脱水後	消毒・乾そう後
Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)	1	7.8×10^7	3.7×10^7	測定限界以下
	2	7.6×10^7	5.9×10^7	測定限界以下
	3	8.5×10^7	3.3×10^7	測定限界以下
	4	9.3×10^7		
	5	1.2×10^8		
	平均	9.0×10^7	4.3×10^7	測定限界以下
Escherichia coli (大腸菌)	1	1.5×10^8	4.0×10^7	測定限界以下
	2	1.5×10^8	4.8×10^7	測定限界以下
	3	1.4×10^8	1.6×10^7	測定限界以下
	4	1.6×10^8		
	5	1.4×10^8		
	平均	1.5×10^8	3.5×10^7	測定限界以下

医療・介護施設むけ福祉用具サービス

マットレスの
洗浄・消毒・リース・レンタル

1日の大半をベッドで過ごされる高齢者・療養者には、清潔で快適なマットレスが大切です。除菌効果の高いマットレスの洗浄・消毒・リース・レンタルをおすすめいたします。

車いすその他福祉用具の
メンテナンス付定期レンタル

高機能なモジュラー・ティルト&リクライニングから手軽な車いすなどいろいろな福祉用具を、手ごろな月額料金で、導入できます。

1年ごとに消毒・メンテナンス済の用具と交換、サイズ・仕様・機種変更でき、実用性抜群。



オットーボック Mシリーズ
座幅33~58cm
全サイズ対応



オットーボックのシーティング
アクセサリ各種対応



レボ シリーズ車いすの
シーティングのシーティング
アクセサリ各種対応




スタンディングリフト
スカイリフト



リハビリに最適
足こぎ車いすプロフアンド

特殊寝台

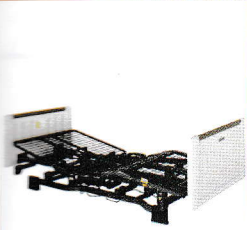

P-5~

特殊寝台付属品



P-17~

床ずれ防止用具



P-21~

体位変換器



P-26~

車いす



P-28~

可搬型階段昇降機



P-48

電動車いす



P-49~

電動四輪




P-51

車いす付属品




P-53~

スロープ

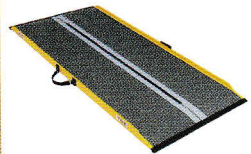

P-59~

認知症老人徘徊感知機器

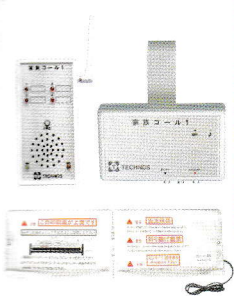

P-62

移動用リフト



P-63~

歩行器



P-68~

歩行補助杖



P-74

手すり



P-75

ポータブルトイレ (腰掛便座)



P-84~

入浴用品



P-87~

住宅改修



P-92~

介護保険 制度・手続き



P-95~



上記マークが表記されている商品は、本号カタログより採用された商品です。