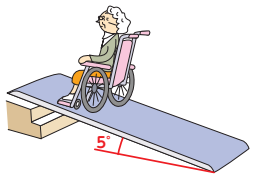
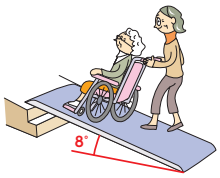
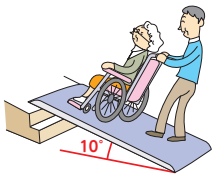
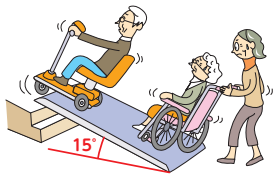
スロープ

【単位：cm】

スロープの選び方

使用状況 / スロープ長	自力走行	非力な介助者	一般の介助者	最大適応段差
	傾斜角度5度 	傾斜角度8度 	傾斜角度10度 	傾斜角度15度 
	介助なしで使用	高齢者の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ	段差・高さ
40cm	3cm	5cm	6cm	10cm
65cm	5cm	9cm	11cm	15cm
1.0m	8cm	13cm	17cm	24cm
1.2m	10cm	16cm	20cm	30cm
1.5m	13cm	20cm	25cm	37cm
1.75m	15cm	24cm	30cm	43cm
2.0m	17cm	27cm	34cm	50cm
2.4m	20cm	33cm	41cm	60cm
2.85m	24cm	39cm	49cm	73cm

※車いす及び車いす利用者の重さや介助する方の体力により異なります。上記の表はあくまでも目安としてご活用ください。


ケアスロープ詳細表 (P63)

【ケアスロープJ組合せ・適応段差目安表】


上端部スロープ種類 / 上端部適用段差目安 ＼ 下端部スロープ種類 / 下端部適用段差目安		CS-150 21cm(8°)～26cm(10°)	CS-175 21cm(7°)～26cm(9°)	CS-200 21cm(6°)～26cm(8°)	CS-240C 21cm(5°)～26cm(6°)	CS-285C 21cm(4°)～26cm(5°)
CS-150	38cm(8°)～53cm(12°)	CSJ-300	CSJ-325	CSJ-350	CSJ-390	CSJ-435
CS-175	41cm(8°)～58cm(12°)	CSJ-325	CSJ-350W	CSJ-375	CSJ-415	CSJ-460
CS-200	44cm(8°)～63cm(12°)	CSJ-350	CSJ-375	CSJ-400	CSJ-440	CSJ-485
CS-240C	50cm(8°)～71cm(12°)	CSJ-390	CSJ-415	CSJ-440	CSJ-480	CSJ-525
CS-285C	56cm(8°)～81cm(12°)	CSJ-435	CSJ-460	CSJ-485	CSJ-525	CSJ-570

【ケアスロープKはこのような場合でも活用できます】


●スロープの下端側に障害物があるとき

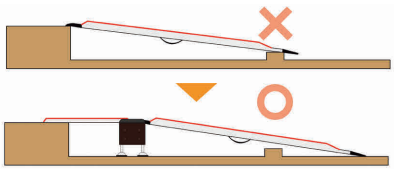

●スロープの角が壁に当たってしまうとき

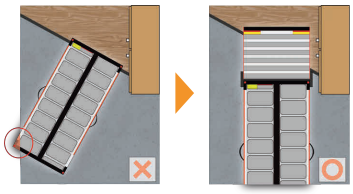


●設置面が曲線になっているとき

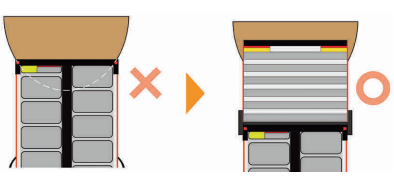


【パーツサイズ詳細表】


ジョイント台（ケアスロープJ用）

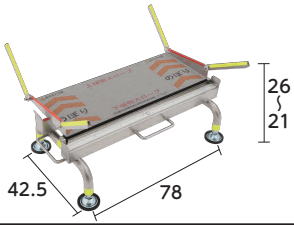

斜め上がり框補正台（ケアスロープK用）

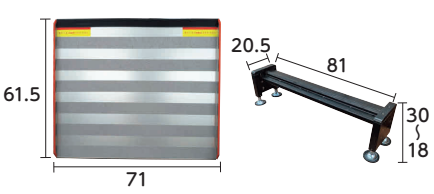

傾斜補正台（ケアスロープT用）

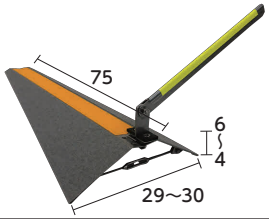

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。