
歩行器


歩行器の使い方

固定型 フレームが固定されている歩行補助器です。

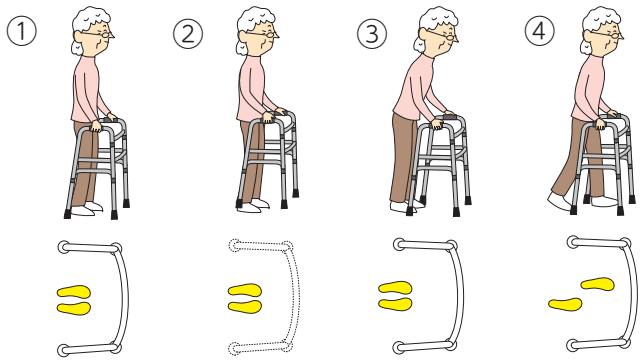

①歩行器のグリップをしっかり握る。
②③持ち上げて前に出す。
④少しずつ移動する。

キャスター付 脚にキャスターとストッパーの付いた歩行補助器です。

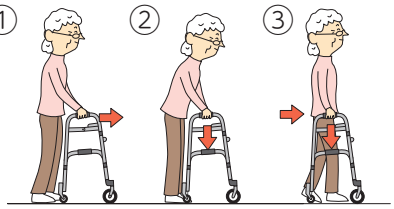

①歩行器を前に出す。
②真上から体重をかけてストッパーを作動させる。
③身体を少しずつ移動する。

固定型


セーフティーアーム ウォーカー・SS(P93)


セーフティーアーム ウォーカースリム(P93)

キャスター付


セーフティーアーム Vタイプウォーカー(P94)


セーフティーアームウォーカー Cタイプ(P93)

前輪360°


ハッピーⅢミニ(P97)


ハッピーⅡ(P97)


ハッピーⅡトール(P97)

握手

持ち運びに便利


ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー(P95)


ヘルシーワンライト カラフル(P95)


ヘルシーワンW(P95)


レジェールキャンシット(P95)


ヘルシーワンレジェール(P95)

コンパクト&スリム


シンフォニーSP(P96)


シンフォニーSPスリム(P96)


アイルウォークα(P96)


アイルウォークライト(P96)


テイコブリトル(P96)


テイコブリトルハイⅡ(P95)


テイコブリトルスリム(P96)


セーフティーアーム ロレータポケット(P97)

酸素ボンベ用


テイコブリトルボンベ(P101)

自動駐車ブレーキ付


ジスタ(P99)


ジスタワイド(P99)

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。