シルバーカー・歩行器

シルバーカー

毎日の外出をもっと軽やかに
快適に歩行をサポート

タイプ別の選び方

コンパクトタイプ　散歩(移動)に便利

軽量で小回りが利き
持ち運びラクラク!
電車・バス移動にも便利

こんな方におすすめ!
- お出かけを楽しみたい方
- 乗り物の利用が多い方
- 身軽に移動したい方



持ち運び	収納	安定性
◎	△	○

ミドルタイプ　万能型

歩行の安定感と収納力の
バランスが良い!
散歩と買い物どちらも便利

こんな方におすすめ!
- 散歩や買い物どちらも使いたい方
- 長い距離を歩きたい方
- 収納も欲しい方



持ち運び	収納	安定性
○	○	○

ボックスタイプ　買い物に便利

収納力が抜群!
安定感も高く、しっかり座れる!
買い物や荷物の運搬にも便利

こんな方におすすめ!
- 毎日の買い物が多い方
- 荷物をたくさん運びたい方
- 座面の広さを重視する方




持ち運び	収納	安定性
△	◎	○

ポイント　より安全にご利用いただくために

持ち手高さの目安

一般的に、肘を約20°～30°程度に曲げた高さが押しやすい高さとなります。持ち手の高さが合わないと、姿勢が悪くなったり歩行が不安定になります。

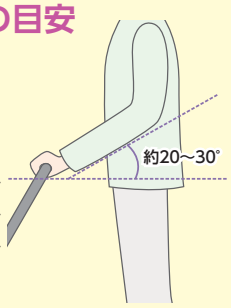

座面に座る時

駐車ブレーキを必ずロックしてからお座りください。車体が固定され、安心して腰掛けることができます。

身体や路面に合わせたキャスター設定

歩行バランスや路面状況の歩きやすさに応じて切替するのがおすすめ! 使い始めて操作が不慣れな方は直進固定(角度制限)にするとより歩行が安定します!

チェック

前輪キャスターにある切替部で
簡単に角度切替ができるものもあります。

3WAYタイプ　360°回転
直進固定、左右首振り、360°回転の3つの角度より選択できるタイプ。

2WAYタイプ　左右首振り
直進固定・左右首振り。又は直進固定・360°回転の2つの角度より選択できるタイプ。

1WAYタイプ　直進固定
直進固定のみ。
又は360°回転のみのタイプ。

歩行器

歩行に不安がある方や、
身体をしっかり支えたい方に

歩行車

シルバーカーより、体の中心(重心)を車体に近付けて歩く構造になっています。そのため、体重をしっかり預けても車体が安定します。



屋内　屋外

P.46～

歩行器(馬蹄型)

前腕部を乗せる台を備え、上半身で体重を支えながら歩きます。手で強く握る力がない方や、体幹が不安定な方、退院後に自宅内でのリハビリにも使用されます。



屋内

P.51～

歩行器

屋内での移動、立位や歩行動作をサポート。持ち上げて前に置き、一歩ずつ歩くためしっかり体重を預けられます。
4本脚の他、前輪キャスター付のタイプもあります。



屋内

P.51～